

TEST URINAIRE DE DEPISTAGE « 1 drogue » – type BOITIER




www.medicatest.com

Tous droits réservés.

Norme CE – Home Test

1. L'ensemble du kit de test ainsi que l'échantillon doivent être maintenus à température ambiante (18 - 30 C) avant d'effectuer le test.
2. Retirer le kit de test de son emballage avec précautions et uniquement lorsque le test est prêt à être effectué.
3. Tremper la bandelette dans l'échantillon d'urine à analyser pendant 10 à 15 secondes. Veiller à ne pas dépasser le niveau indiqué par les flèches.
4. Retirer le test de l'échantillon et le poser sur une surface propre et sèche.
5. Lire les résultats après 5 minutes. Il est conseillé de placer le test sur un fond clair pour procéder à la lecture des résultats. Les résultats obtenus après 30 minutes ne sont pas valables.

Interprétation des résultats

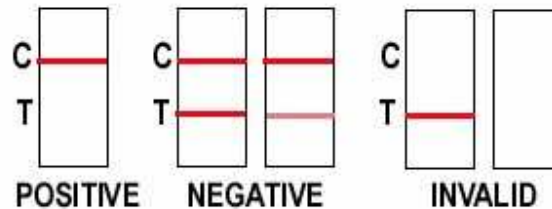

Négatif: En plus de la ligne de couleur rouge dans la zone de contrôle (C), une seconde ligne rouge ou rose est présente dans la zone de test (T). L'intensité de cette ligne de test peut être plus ou moins foncée que la ligne de contrôle.

Positif: Seule une ligne de couleur apparaît dans la zone de contrôle (C). Aucune ligne n'apparaît dans la zone de test (T). Cela indique la présence de stupéfiant en quantité supérieure au seuil de détection.

Invalidé: Aucune ligne n'apparaît dans la zone de contrôle (C). Un résultat invalide peut être causé par une erreur de manipulation ou par une détérioration du test. Le test doit être renouvelé avec un autre kit.



TESTS DE DEPISTAGE

Kit de dépistage « une drogue »

MedicaTest.com – Tous droits réservés

FRANCAIS

Dernière révision de la notice : mars 2007

CADRE D'UTILISATION

Le kit de dépistage « une drogue » est un test d'immuno-chromatographie destiné à la détection rapide et qualitative d'une substance stupéfiante dans un échantillon d'urine.

Le test « une drogue » fournit seulement un résultat analytique préliminaire. Une recherche plus avancée par l'utilisation d'une chromatographie phase gazeuse ou d'une spectrométrie de masse devra être mise en œuvre par la suite pour confirmer les résultats de façon précise et quantitative. A ce stade, un jugement d'expert et des considérations médicales sont indispensables pour interpréter les résultats, notamment lorsque le résultat préliminaire fourni par le test est positif.

EXPLICATION DU TEST

Sur la bandelette de test figurent les lettres T et C pour respectivement "ligne de Test" et "ligne de Contrôle". Aucune des "ligne de Test" et "ligne de Contrôle" n'est visible dans la zone de résultats tant qu'aucun échantillon n'a été utilisé. La "ligne de Contrôle" sert à indiquer le bon fonctionnement du test. Cette ligne de contrôle doit toujours apparaître si la procédure de test a été correctement suivie et si les agents réactifs fonctionnent parfaitement.

CONTENU

Le kit de dépistage contient tous les éléments nécessaires au test :

1. test bandelettes en boîtier.
2. feuillet d'instructions.

ACCESSOIRES NECESSAIRES MAIS NON FOURNIS

1. un récipient (de type gobelet) pour collecter l'échantillon.
2. une montre ou un chronomètre.

PRECAUTIONS

1. Test pour diagnostic in-vitro.
2. Eviter toute contamination de l'échantillon d'urine en utilisant à chaque fois un récipient neuf.
3. Un échantillon d'urine peut être source d'infections potentielles. Prendre les dispositions de prévention adéquates.
4. Ne pas fumer et/ou manger en manipulant les échantillons.
5. Le kit doit être conservé dans son emballage d'origine scellé jusqu'à son utilisation.
6. Ne pas utiliser le kit s'il est endommagé.
7. Ne pas utiliser le kit après sa date de péremption.

STOCKAGE ET STABILITE

Le kit doit être conservé dans son emballage d'origine à une température comprise entre 4 et 30 C°.

PRELEVEMENT D'ECHANTILLON ET PREPARATION

1. Un échantillon d'urine récent ne requiert aucun traitement particulier.
2. L'échantillon doit être collecté dans un verre ou un gobelet plastique propre.
3. Si le test n'est pas effectué immédiatement, l'échantillon doit être placé au réfrigérateur.
4. L'échantillon doit être à température ambiante au moment de réaliser le test.
5. Un échantillon contenant un précipité peut conduire à des résultats erronés. Si tel est le cas, il convient de récolter un nouvel échantillon.

PROCEDURE DE TEST

1. Sortir le test de son emballage et le placer sur une surface plane et propre.
2. Tremper la bandelette dans l'échantillon d'urine pendant 10 à 15 secondes en veillant à ne pas dépasser le niveau délimité par les flèches verticales.
3. Attendre 5 minutes pour lire les résultats.

INTERPRETATION DES RESULTATS

1. Lorsque le test réagit, une ligne violacée apparaît dans la partie de contrôle de la bandelette : cela signifie que la « ligne de Contrôle » fonctionne correctement.
2. La partie inférieure de la bandelette correspond au résultat du test. Si une autre bande violacée apparaît dans cette zone, elle correspond à la « ligne de Test ».

NEGATIF: 2 LIGNES COLOREES

L'apparition de deux lignes violacées indique un résultat négatif au test. Aucune substance THC n'a été détectée en quantité supérieure au seuil du test. Attention : de part la nature chimique du THC, la couleur des bandes peut être relativement pâle par rapport à des tests de dépistage d'autres types de stupéfiants, c'est pourquoi il est recommandé de lire les résultats dans une zone suffisamment éclairée.

POSITIF: UNE SEULE LIGNE COLOREE

L'apparition d'une seule ligne violacée dans la zone de contrôle de la fenêtre de résultats (ligne de Contrôle) indique un résultat positif : l'échantillon contient du THC à une concentration supérieure au seuil de détection du test.

Il est conseillé de soumettre l'échantillon d'urine à une analyse plus complète en laboratoire (chromatographie, spectrométrie).

INVALIDE:

Une ligne violacée devrait toujours apparaître dans la partie de contrôle du test (ligne de Contrôle). Le résultat est invalide si aucune ligne n'apparaît dans cette zone.

Note : La présence d'une ligne très pâle dans la zone de résultats, visible 5 minutes, indique que la quantité de THC dans l'échantillon est voisine ou inférieure au seuil de détection du test. L'échantillon doit alors être testé à nouveau ou être soumis à une analyse plus complète en laboratoire (chromatographie, spectrométrie).

LIMITATIONS

1. Le test est prévu pour une utilisation sur un échantillon d'urine humaine exclusivement.
2. Il est possible que certains facteurs tels qu'une erreur de manipulation, de procédure ou la présence d'autres substances dans les urines interfèrent avec le test et conduisent à des résultats erronés.
3. Une pollution quelconque de l'échantillon d'urine peut conduire à des résultats erronés quelle que soit la méthode d'analyse. S'il y a suspicion de pollution, le test doit être renouvelé sur un autre échantillon.
4. Un résultat positif au test ne fournit aucune indication quant au taux d'intoxication ou à la concentration urinaire.
5. Le test doit être lu 5 minutes après contact du test avec l'échantillon.
6. Le tabagisme passif au THC peut conduire à un résultat positif pour ce type de test.

AVERTISSEMENT

Le kit de dépistage est un test qualitatif. Ce test ne permet pas de déterminer la quantité de drogue et de métabolites présente dans les urines. Le test permet de distinguer les échantillons positifs et les échantillons négatifs. Un résultat positif signifie que l'échantillon contient le stupéfiant en quantités supérieures au seuil de détection du test.